



OWANDY-CAM^{HD}

**CIESZ SIĘ ŁATWIEJSZĄ KOMUNIKACJĄ
Z PACJENTAMI**

CYFROWA WEWNĄTRZYSTNA KAMERA USB

Owandy-Cam



Ułatwiona komunikacja z pacjentami i koordynacja planu leczenia

Wyjaśnijaj pacjentom procedury kliniczne w łatwiejszy sposób!
Twoi pacjenci będą bardziej zaangażowani i zyskają większe zaufanie do procesu.



4 tryby wykonywania zdjęć

Funkcja „focus free” zapewnia większą głębię ostrości i wysoką jakość obrazu.
Urządzenie nie wymaga żadnych regulacji, dzięki czemu zapewnia idealnie wyraźny obraz, od pełnego uśmiechu po pojedynczy ząb - a dodatkowo oszczędza Twój czas!

1



SMILE

2



INTRAORAL

3




INTRAORAL

4



MACRO

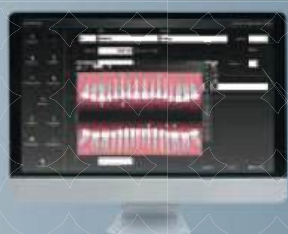

W 100% zintegrowany

Kamera Owandy-Cam HD jest zintegrowana
z wiodącymi pakietami oprogramowania.



Ergonomiczna konstrukcja i szerokokątny obiektyw 105°

Zakrzywiony kształt i bardzo cienka główka zapewniają większy komfort pacjenta i zapobiegają urazom jamy ustnej.

Kąt widzenia 105° wyróżnia ten model spośród innych kamer dostępnych na rynku, umożliwiając efektywniejszą diagnostykę dalszych obszarów jamy ustnej.



Przyjazny dla użytkownika

Aby ustawić obraz, wystarczy przesunąć przycisk dotykowy. Unikniesz rozmytych obrazów, co pozwoli na pracę z pełnym zaufaniem.

Złącze USB2 ułatwia przenoszenie kamery i udostępnianie jej współpracownikom na inne stanowiska w klinice!

Parametry techniczne

Czujnik	Wysokiej czułości 1/4 " Sony CCD
Rozdzielczość	50 klatek / sek
Oświetlenie	8 diod LED
Regulacja	Duża głębia ostrości
Kąt widzenia	105°
Długość kabla USB	2.5m
Wymiary (dł x szer x wys)	205 x 28 x 24mm
Szerokość części doustnej	11mm
Waga rękojeści	55g
Konfiguracja obrazu	Przycisk dotykowy



System "Push&Pull"

Owandy-Cam HD z łatwością mieści się w uchwycie na panelu lekarza w unie stomatologicznej, podobnie jak wszystkie inne końcówki.



CYFROWY PRZEPŁYW DANYCH OWANDY RADIOLOGY

KOMPLEKSOWO SPEŁNI WSZYSTKIE TWOJE WYMAGANIA

UNITY
CEFALOMETRYCZNE




UNITY 2D/3D



HF GENERATORY
WEWNĄTRZUSTNE



WEWNĄTRZUSTNE
SKANERY PŁYTKOWE

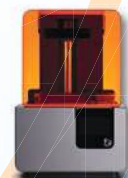

EKSPORT
DO DRUKAREK 3D



SZABLONY CHIRURGICZNE



BEZPOŚREDNIE SENSORY USB

CYFROWA WEWNĄTRZUSTNA
KAMERA USB



WEWNĄTRZUSTNY
SKANER 3D



IMPORT SKANU TWARZY
PLIKI .PLY



2, rue des Vieilles Vignes
77183 Croissy-Beaubourg - FRANCE
Tel.: +33 1 64 11 18 18 - info
info@owandy.com - www.owandy.com

Dystrybutor w Polsce

makRomed

| www.makromed.com.pl
| biuro@makromed.com.pl
| +48 42 678 88 54
| ul. Czechosłowacka 1
| 92-216 Łódź